



LA BENDA D'EMERGENZA



FDA Approved and Patent Protected >
 < CE Marking for Europe # 0482 >
 < NATO Reference Number 651031162452 >
 < NSN# 6510-01-460-0849 - P/N# FCP-01, 4" >
 < NSN# 6510-01-492-2275 - P/N# FCP-02, 6" >
 < NSN# 6510-01-515-7528 - P/N# FCP-05, 6" >

Benda compressiva per ferite e traumi

(ferite d'arma da fuoco, taglio, lacerazioni con abbondante emorragia, ustioni)

La Benda d'Emergenza è la prima vera innovazione in questo genere di articoli da 50 anni a questa parte.

First Care Products Ltd. ha sviluppato un nuovo dispositivo di primo soccorso, protetto da brevetto internazionale, per stagnare il sangue di ferite emorragiche da arma o da trauma in situazioni di emergenza, prima dell'arrivo dei soccorsi.

La Benda di Emergenza è la soluzione ideale per trattamenti in situazioni di emergenza, in cui ogni secondo è importante. *Il prodotto riunisce in un unico articolo diversi dispositivi di primo soccorso, come: tampone non aderente, bendaggio compressivo, benda elastica e laccio emostatico.*

La Benda di Emergenza è di facile applicazione, sia per operatori professionisti che non professionisti e svolge diverse funzioni. È ideale per il First Aid Kit individuale di ogni singolo soldato.


La Benda di Emergenza è studiata tenendo conto delle situazioni più estreme. Realizzata per il trattamento di qualsiasi ferita emorragica, questa benda, sterile con tampone, non aderente, esercita pressione in qualsiasi punto del corpo, si avvolge e si fissa facilmente e agisce come un laccio emostatico in caso di grave emorragia. **L'uso è talmente semplice che anche una persona ferita riesce ad applicare la benda con una sola mano.**

bendaggio

compressione

turniquette

fissaggio

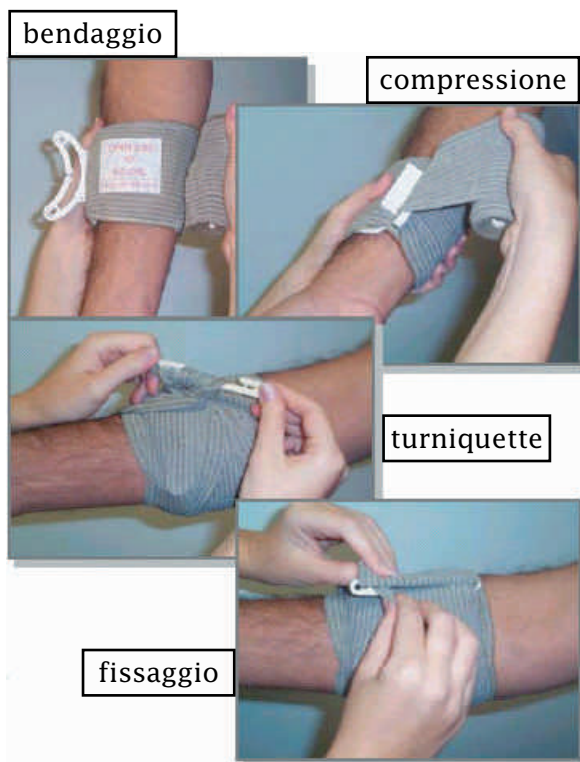

APPLICAZIONI:

- Uso militare - First Aid Kit individuale
- Uso militare - dotazione ASA e infermerie
- Servizi Medici di Emergenza
- Addetti al pronto intervento
- Vigili del Fuoco
- Cassetta o zaini di pronto soccorso
- Cassetta di pronto soccorso su autoveicoli

VANTAGGI:

- Pressione diretta immediata
- Facile applicazione anche da parte della persona ferita
- Un unico prodotto riunisce:
 - **tampone non aderente**
 - **bendaggio compressivo**
 - **benda elastica**
 - **laccio emostatico e turniquette**
- Notevole risparmio di tempo e denaro



Confezione singola a doppio involucro. Quello esterno, resistente a temperature estreme, è in colore verde militare con istruzioni per il corretto uso.




L'involucro interno è in Polietilene ad alta protezione. La confezione sterile e monouso è sottovuoto, riducendo così peso e volume.

ISTRUZIONI PER L'USO




1. Posizionare il tampone sulla ferita e avvolgere la benda elastica intorno all'arto o alla parte del corpo

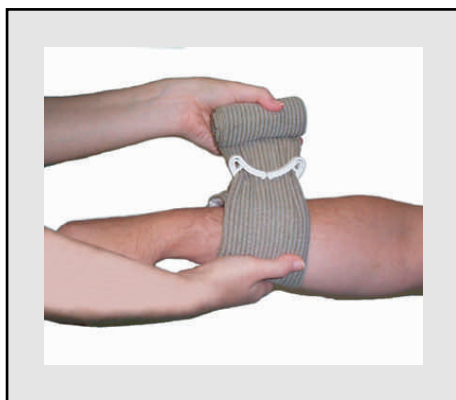

2. Inserire la benda elastica nella barretta di pressione.



3. Stringere la benda elastica.

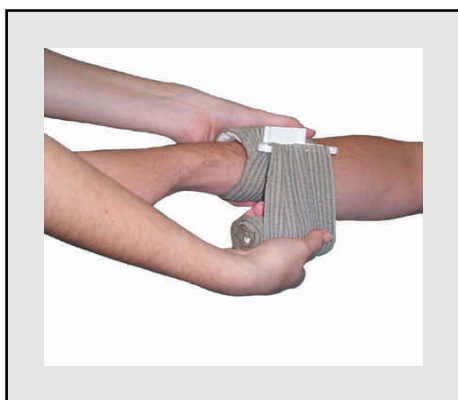

4. Tirare all'indietro spingendo la barretta di pressione sul tampone.



5. Avvolgere strettamente la benda elastica sulla barretta di pressione coprendo tutti i lati del tampone.



6. Fermare le estremità della barretta di chiusura nella benda elastica.

BENDA D'EMERGENZA CON DOPPIO TAMPONE PER FERITA DI ENTRATA E DI USCITA

NOVITA'

Il secondo tampone




scorre lungo la fascia

per essere applicato



sulla ferita di uscita

Si può utilizzare anche

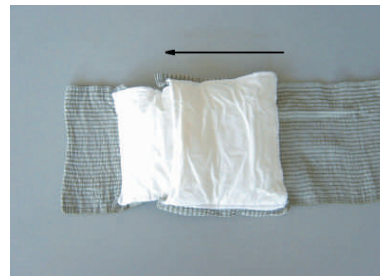

come doppio tampone

RICHIEDI UN CAMPIONE GRATUITO ED IL CD-ROM

Distribuito da: 

Via Agogna, 20 - 28100 NO
Tel. +39 0321.442441 - Fax +39 0321.392190 - E-mail: info@flamor.com

www.flamor.com