




3XL37P

CONFIGURAZIONE BASE

La poltrona è realizzata in tubolare da mobilio di notevole caratteristiche prestazionali che garantiscono stabilità e robustezza. I materiali di costruzione sono tubolari quadri rettangolari e tondi da mobilio Uni 7947/81 e 8913, DIN 2394, bussole filettate in AVP, piatti in FE.

La base della struttura molto compatta permette all'operatore di avvicinarsi al paziente risultando, in questo modo molto pratica e confortevole. Il piano superiore ed i cuscionali sono in schiuma ad alta densità ricoperti in tessuto spalmato (skai, finta pelle) ignifugo classe 1 IM. La densità della gomma utilizzata garantisce, al paziente, comodità e un corretto sostegno durante la visita.

Le parti elettriche rispondono alle normative vigenti in campo ospedaliero.

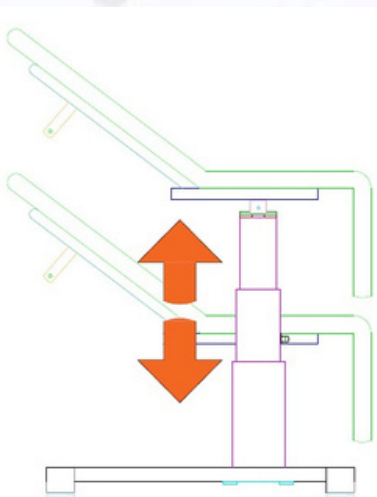

SPECIFICHE TECNICHE

La struttura ha un'ottima manovrabilità determinata dall'utilizzo di 3 attuatori elettrici comandati da una pulsantiera.

La colonna centrale molto robusta e resistente permette di regolare la struttura in altezza, dai 57 ai 98cm, la sua forza è pari a 4000N. Lo schienale è regolabile con attuatore elettrico ed in grado di raggiungere +75° in positivo e -10° in negativo; il cuscino gambale anch'esso azionato da attuatore elettrico raggiunge i -90° in negativo e +5° in positivo. La poltrona è dotata di porta rotolo e ha 4 piedini regolabili che garantiscono maggior stabilità.


La struttura segue un processo di fosfosgrassaggio, risciacquatura e applicazione della vernice in polvere polimerizzata a 200° il suo spessore minimo è 70/80 micron. La finitura è lucida.

DIMENSIONI:

Lunghezza: 182cm

Larghezza: 68cm

Altezza: 57-98cm

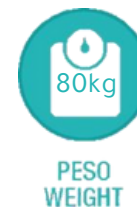

RIVESTIMENTO

L'imbottitura è in gomma ad alta densità, la sua copertura è in tessuto spalmato (skai, finta pelle) ignifugo classe 1 IM lavabile con i comuni detergenti presenti in commercio.



IMPERMEABILE
WATERPROOF



IGNIFUGO
FIREPROOF

COLORI DISPONIBILI



OPTIONAL

- COD.A6.MO47 Cassetto porta oggetti
- COD.OPT3.3XL Kit ruote retrattili
- COD.OPT6.3XL Kit ruote con sistema ad arco
- COD. 3XLQR Quick-release (sgancio rapido sullo schienale)
- COD.OPT1.3XL37 Braccioli abbattibili
- COD.A12LVP - Rivestimento per cosciale anatomico in skai 2 pz

CONFORMITÀ

Dispositivo medico di classe 1 conforme ai requisiti della direttiva (UE) 2017/745 (MDR)

CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI (CND)

Fabbricante: CALDARA SRL

Codice attribuito da CALDARA SRL: 3XL37P

Classificazione CND: V08020101

Numero progressivo attribuito dal sistema (RDM): 2225488