

Pesapersona digitale professionale a colonna

- Piattaforma "slim" per piccoli spazi
- Lettura simultanea peso / BMI / altezza
- Display su alta colonna per una lettura facile e veloce
- Spostabile facilmente grazie alle 2 ruote integrate e alla sua leggerezza

WU150 - Standard pag. 7

Peso, tara, peso mamma/bambino, blocco del peso, BMI (indice massa corporea), azzeramento automatico, autoOff programmabile

Struttura

Base in alluminio verniciato con pedana antiscivolo in metallo verniciato. Visore in ABS a tripla lettura fissato su colonna in tubolare verniciata. 4 grandi piedini regolabili e ruote per il trasporto

Dimensioni

Totale: W275 x D430 x H900 mm / Base W275 x D295 x H55 mm
Colonna Ø60 x H800 mm

Alimentazione

Alimentatore esterno e vano batterie alcaline 6 x AAA (batterie non incluse) o kit batteria ricaricabile durata 40h (optional)

Omologazioni

Direttiva metrica NAWI 90/384-2014/31/UE


Classe di precisione III secondo la norma EN45501

Dispositivi medici MDR Regolamento UE 2017/745

Classe di rischio Im con funzione di misura

Packaging

1 pz W330 x D1100 x H290 mm / Peso: netto 7 kg - lordo 10 kg

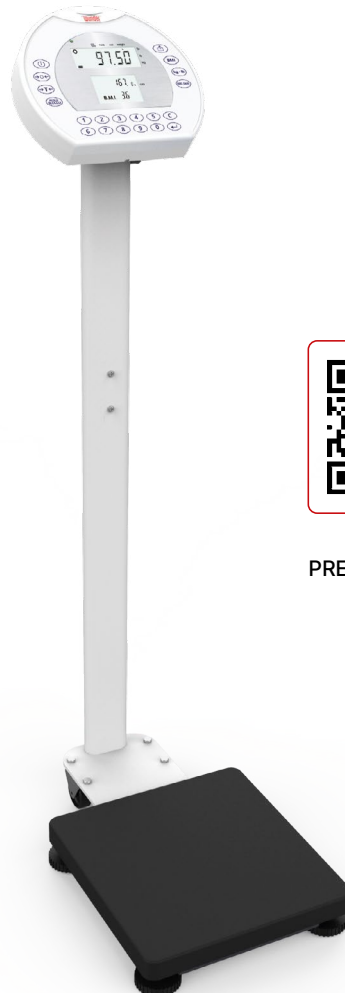

VIDEO
PRESENTAZIONE



Visore inclinabile per una lettura più chiara e confortevole



2 ruote di trasporto integrate



Statimetro frontale o laterale (optional)



Statimetri optional (pag. 61/62)

GMDN: 38211 - CND: V0399 - Repertorio: 2497352 - con WH200D: 2516880 - con WH200: 2516878

Modello	Codice	Portata	Divisione	Piano pesata
RB Colonna	00071ID	60/150kg	20/50g	W275 x D295mm
RB Colonna	00071I	150/250kg	50/100g	
RB Colonna PRO	00071IHR	60/150/250kg	20/50/100g	

Accessori inclusi: alimentatore, RS232, livella, piedini antiscivolo regolabili, ruote trasporto, garanzia 2 anni

Optional	Codice
Software wMed Basic	000WMEDB
Batterie ricaricabili durata 40h	BAME01
WH200 statimetro 60-210cm (pag. 62)	00069AB
WH200D statimetro 120-202cm (pag. 61)	00051D
WS stampante termica (pag. 94)	01131T
Bluetooth	01137NBT
Wifi	01137NWIFI

Servizi Optional	Codice
Omologazione	AOMOL
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato di taratura con pesi Accredia	ACOSITMD
Certificato di taratura LAT Accredia	ACOLAT2
Estensione garanzia 5 anni	AGAES
Verifica periodica 3 anni	AOPER1



WU150 - Standard



con R2020, RA, RB, RH, RW, DE, PS20, RW-XL, RL

Questa è la configurazione che viene applicata per tutte le pesapersone che hanno un utilizzo generico in ambito medicale.

Il design della tastiera e le funzioni sono state studiate per poter coprire tutte le necessità dell'operatore che le utilizza, rendendo l'esperienza con il sistema WU150 user friendly.

Visore ØW215 x D180mm, in ABS a doppio LCD a tripla lettura

1° Display LCD Peso a 5 cifre 20mm

2° Display LCD Altezza/BMI multiriga a 3 cifre 12mm

Funzioni

- | | |
|--|---|
| <p> ON/OFF
Tasto di accensione e spegnimento.
Tenendo premuto per 3 secondi si spegne la bilancia.</p> <p> Zero
Azzeramento dell'indicazione del peso (entro il $\pm 2\%$ della portata).</p> <p> Tara
Permette di effettuare la tara.</p> <p> Hold
Permette di bloccare il peso del paziente (nel caso abbia difficoltà a stare fermo) e tenere fissa l'ultima pesata.</p> | <p> Cancella
Permette di cancellare cifre errate durante l'immissione dei dati personali.</p> <p> Esportazione
Esporta i risultati a PC o stampante termica.</p> <p> BMI
Permette di calcolare il BMI o IMC del paziente</p> <p> Unità di misura
Permette di cambiare da un'unità di misura all'altra.</p> <p> Pretara
Permette di memorizzare un valore di tara impostando manualmente il dato da sottrarre (es. vestiti, carrozzina).</p> |
|--|---|

Statimetro adulti elettronico

- Misurazioni facilitate grazie alla lettura digitale
- Cambia facilmente unità di misura
- Pratico ed intuitivo grazie all'asta telescopica
- Applicabile alle balance Wunder e a muro

Installabile su balance Wunder

Compatibile con i seguenti modelli:

RH, RA colonna, RB colonna, RW02 CORRIMANO, RW2.0 BASIC, R2020 cavo, WBA


Lettura digitale

Il display digitale rende le misurazioni semplici e immediate



Applicabile a muro

Lo statimetro si può fissare facilmente a una parete tramite l'utilizzo dell'apposito supporto

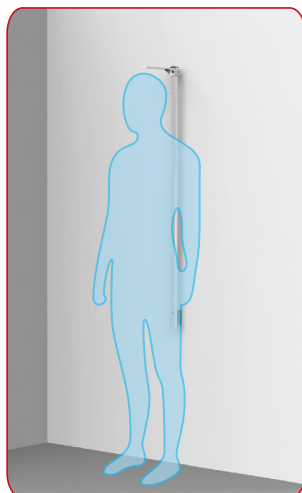

Struttura

Alluminio anodizzato serigrafato con paletta per misurare altezza in ABS

Dimensioni

W35 x D55 x H940 mm
Paletta in ABS misura 25cm

Alimentazione

2 batterie AA (incluse)

Packaging

1 pz dimensioni W60 x D120 x H1040 mm
Peso: netto 1 kg - lordo 1,6 kg



CND: V030299 - Repertorio: 676627

Modello	WH200D
Codice	00051D
Portata	Da 120 a 202cm
Unità di misura	cm/pollici
Divisione	1 mm
Garanzia	2 anni

Statimetro adulti telescopico

- Misura fino a 225cm, doppia unità di misura
- Struttura in alluminio anodizzato
- Pratico ed intuitivo grazie all'asta telescopica
- Applicabile alle balance Wunder e a muro

Installabile su balance Wunder

Compatibile con i seguenti modelli:

RH, RA colonna, RB colonna, RW02 CORRIMANO, RW2.0 BASIC, R2020 cavo, WBA


Semplice lettura

Grazie all'asta serigrafata e all'indicatore in rosso la lettura delle misurazioni è intuitiva e semplice



Applicabile a muro

Lo statimetro si può fissare facilmente a una parete tramite l'utilizzo dell'apposito supporto

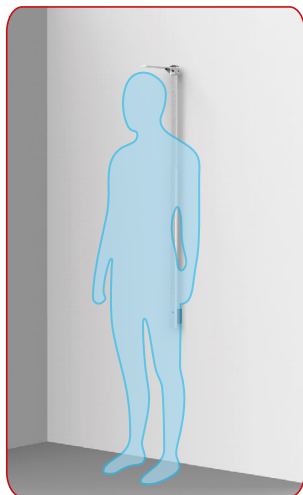

Struttura

Alluminio anodizzato serigrafato con paletta pieghevole in ABS per misurare altezza

Dimensioni

W35 x D55 x H940 mm

Paletta in ABS misura 25cm

Packaging

1 pz dimensioni W40 x D70 x H1040 mm

Peso: netto 0,7 kg - lordo 1 kg



CND: V030299 - Repertorio: 676627

Modello	WH200	WH200
Codice	00069AB	00069AD
Portata	Da 60 a 210cm	Da 65 a 225cm
Unità di misura	cm/pollici	cm/pollici
Divisione	1 mm	1 mm
Garanzia	2 anni	2 anni