

DE5



Pesapersona a sedia elettronica

- 4 ruote girevoli per facilitare il trasporto
- Adatta alla pesatura di pazienti fino a 300kg
- Braccioli e poggipiedi regolabili per un accesso più facile
- Maniglia ergonomica rende più semplice il trasporto



VIDEO
PRESENTAZIONE



WU150 - Standard

Peso, tara, blocco del peso, BMI (indice massa corporea), azzeramento automatico, autoOff programmabile

Struttura

Tubolari in metallo verniciato con visore in ABS regolabile, 4 ruote girevoli a 360° con due freni di sicurezza, maniglia imbottita per un trasporto comodo

Dimensioni

Totale W620 x D840 x H970 mm
Seduta W540 x D400 x H400 mm
Altezza seduta da terra 540 mm

Alimentazione

Alimentatore esterno e vano batterie alcaline 6 x AAA (batterie non incluse) o kit batteria ricaricabile durata 40h (optional)

Omologazioni

Direttiva metrica NAWI 90/384-2014/31/UE
Classe di precisione III secondo la norma EN45501
Dispositivi medici MDR Regolamento UE 2017/745
Classe di rischio Im con funzione di misura

Packaging

1 pos dimensioni W620 x D810 x H1140 mm
Peso: netto 20 kg - lordo 35 kg




Braccioli mobili per facilitare accesso al paziente



Poggipiedi regolabili a 90°



Visore reclinabile per una lettura più ergonomica

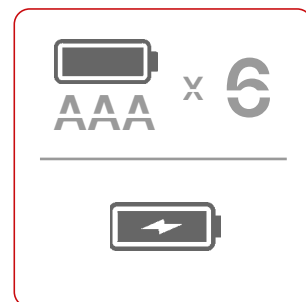

Alimentato da batterie alcaline.
Optional: batteria ricaricabile

CND: V0399 - Repertorio: 2497344

Modello	Codice	Portata	Divisione	Piano-Pesata mm
DE5	00091B	300kg	100g	W540 x D400

Accessori inclusi: alimentatore, RS232, livella, 4 ruote girevoli a 360°, 2 freni di sicurezza, braccioli/poggipiedi reclinabili, garanzia 2 anni

Optional	Codice	Servizi Optional	Codice
Ruote antistatiche		Omologazione	AOMOL
Porta alimentatore	00091BP	Certificato prove elettriche	APREL
Batterie ricaricabili durata 40 h	BAME01	Certificato di taratura con pesi Accredia	ACOSITMD
WS stampante termica	01131T	Certificato di taratura LAT Accredia	ACOLAT2
Bluetooth	01137NBT	Estensione Garanzia 5 anni	AGAES
Wifi	01137NWIFI	Verifica periodica 3 anni	AOPER1
Colore seduta			



WU150 - Standard



con R2020, RA, RB, RH, RW, DE, PS20

Questa è la configurazione che viene applicata per tutte le pesapersone che hanno un utilizzo generico in ambito medicale.

Il design della tastiera e le funzioni sono state studiate per poter coprire tutte le necessità dell'operatore che le utilizza, rendendo l'esperienza con il sistema WU150 user friendly.

Visore ø W215 x D180, in ABS a doppio LCD a tripla lettura

1° Display LCD Peso a 5 cifre 20mm

2° Display LCD Altezza/BMI multiriga a 3 cifre 12mm

Funzioni



ON/OFF

Tasto di accensione e spegnimento.
Tenendo premuto per 3 secondi si spegne la bilancia.



Zero

Azzeramento dell'indicazione del peso (entro il $\pm 2\%$ della portata).



Tara

Permette di effettuare la tara.



Hold

Permette di bloccare il peso del paziente (nel caso abbia difficoltà a stare fermo) e tenere fissa l'ultima pesata.



Cancella

Permette di cancellare cifre errate durante l'immissione dei dati personali.



Esportazione

Esporta i risultati a PC o stampante termica.



BMI

Permette di calcolare il BMI o IMC del paziente



Unità di misura

Permette di cambiare da un'unità di misura all'altra.



Pretara

Permette di memorizzare un valore di tara impostando manualmente il dato da sottrarre (es. vestiti, carrozzina).