



seca

Precisione per la salute

Scopri Alpha

IL CAMBIAMENTO RADICALE NELLA CURA DEL PAZIENTE

Supera i limiti del BMI. Ottieni in pochi secondi informazioni clinicamente validate sulla composizione corporea dei tuoi pazienti. Facile come salire su una bilancia, preciso come il gold standard della composizione corporea.

Ti aiutiamo ad aiutare.

seca mBCA Alpha

CONOSCENZE MEDICHE CHE CAMBIANO LA VITA

Ottieni una valutazione clinicamente validata della composizione corporea del tuo paziente. In pochi secondi. Con visualizzazioni chiare e facili da comprendere e parametri significativi come la massa muscolare scheletrica, il grasso viscerale e la massa grassa, ottieni le informazioni necessarie per guidare la terapia, personalizzare gli interventi e prendere decisioni informate, andando ben oltre il BMI e le supposizioni.

🌐 seca.com/mbca-alpha



La chiave per una gestione proattiva del paziente

La vera prevenzione inizia con l'analisi della composizione corporea. Integrata nei controlli di routine, permette di individuare tempestivamente cambiamenti critici come la perdita di massa muscolare o l'aumento della massa grassa. Agire in anticipo significa aiutare i pazienti a costruire una solida base per una salute duratura.



seca analytics 125


Vedi ciò che gli altri non vedono

Misura la composizione corporea con il seca mBCA Alpha e accedi facilmente ai risultati tramite il tuo browser. Parametri completi per adulti – e specifici per bambini – sono a portata di mano. Il software seca analytics 125, basato su cloud, è in continuo aggiornamento e ti mantiene all'avanguardia nell'analisi bioimpedenziometrica.

seca myAnalytics

Metti i risultati nelle mani dei tuoi pazienti

Con la nostra app, i tuoi pazienti possono accedere ai dati sulla loro composizione corporea in qualsiasi momento e ovunque. Possono monitorare i progressi, visualizzare gli obiettivi e rimanere motivati – direttamente dal loro telefono. Perché la motivazione cresce quando i progressi sono visibili!

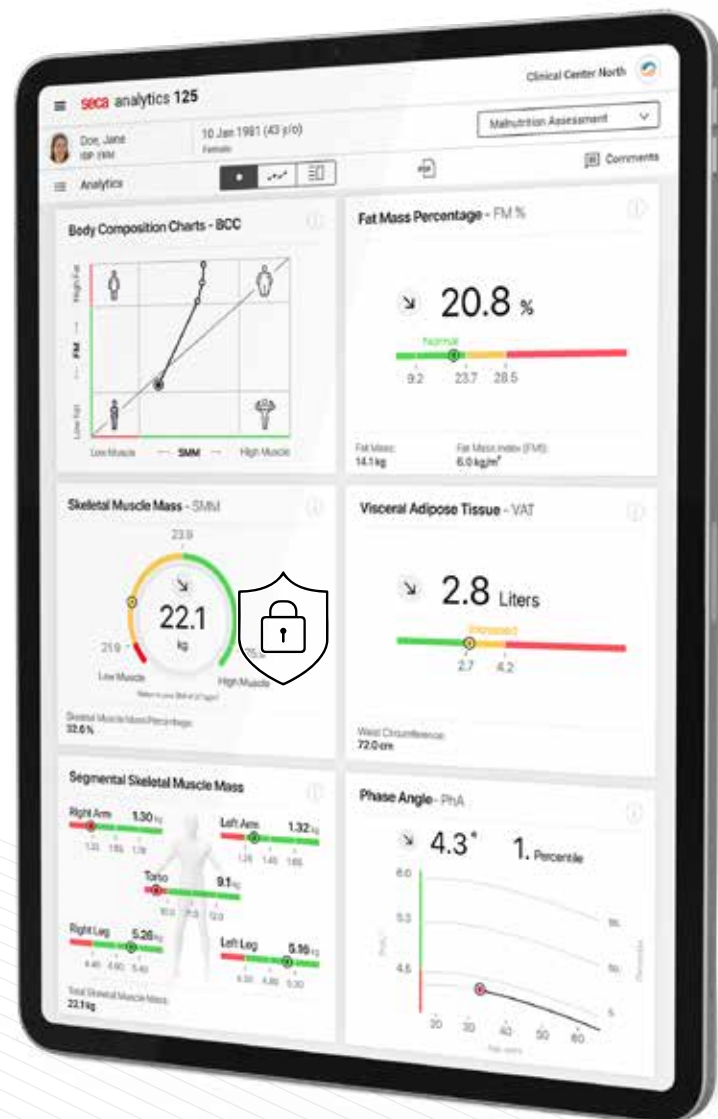

Il massimo livello di protezione dei dati




- Pioniere nella protezione dei dati con certificazione ISO 27001 e ISO 27701
- Protezione efficace dei dati personali secondo il GDPR
- Architettura del sistema sviluppata fin dall'inizio secondo un concetto di sicurezza per design



Validato in riferimento al Gold Standard

Il seca mBCA Alpha stabilisce un nuovo punto di riferimento nell'analisi clinica della composizione corporea. Le sue misurazioni della massa muscolare sono validate tramite risonanza magnetica (RMN) del corpo intero, mentre la massa grassa è confrontata utilizzando il modello a 4 compartimenti, entrambi Gold Standard nell'analisi della composizione corporea. Il nostro processo di validazione copre un ampio range di gruppi di pazienti, inclusi bambini, adulti oltre i 65 anni, persone con BMI superiore a 30 kg/m² e diverse etnie.

Questa solida base scientifica garantisce che i tuoi risultati non siano solo accurati, ma anche clinicamente significativi, supportati da ricerche peer-reviewed e pronti a supportare le tue decisioni.

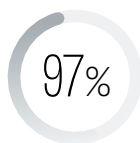

Massa muscolare scheletrica

Accuratezza del
97% rispetto alla
RMN total body



Massa magra

Accuratezza del
98% rispetto al
modello 4C



seca mBCA Alpha

Dispositivo medico	Certificato dal Regolamento sui dispositivi medici (MDR)
Metodo di misura BIA	Analisi di impedenza bioelettrica a 8 punti
Frequenza di misurazione	1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 kHz
Segmenti di misurazione	Braccio destro, braccio sinistro, gamba destra, gamba sinistra, metà destra del corpo, metà sinistra del corpo, busto
Corrente indotta	100 µA
Durata misurazione	24 secondi
Età	5 - 99 anni
Altezza	> 130 cm / > 51"
Software	seca analytics 125
Portata	300 kg
Divisione	50 g < 150 kg > 100 g
Dimensioni (LxAxP)	600 × 1,233 × 653 mm / 23.6 × 48.5 × 25.7 in
Piattaforma (LxAxP)	600 × 70 × 467 mm / 23.6 × 2.8 × 18.4"
Peso netto	20.8 kg / 45.8 libbre
Display	Touchscreen inclinabile e girevole da 4,3"
Alimentazione	A rete elettrica
Interfacce	Ethernet, USB per lettore di codici a barre, Wi-Fi
Accessori	+ Supporto per lettori di codici a barre seca 463 + Lettore di codici a barre seca 473

Codice prodotto **ON IGM ANT NN**

- Piattaforma BIA seca mBCA 555
- Corrimano BIA seca mBCA 545

seca headquarters
(responsible for Europe, CIS & Africa)
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg
Germany

+49 40 20 00 00 0
info@seca.com

Per maggiori informazioni sulle
nostre soluzioni BIA, visitateci qui:



seca.com/mbca