



PVS
FIRST AID

AIVIA

Teche di
protezione e
monitoraggio
DAE



Aivia
by PVS spa

#trovaAIVIA



50+

Paesi



+ 500 000

AIVIA installate



15

anni di esperienza



DAE ad accesso pubblico

L'arresto cardiaco è la principale causa di morte nei paesi sviluppati. Al fine di aumentare i tassi di sopravvivenza, la disposizione dei defibrillatori automatici esterni (DAE) ad accesso pubblico è una soluzione promossa dalle autorità sanitarie.

I DAE sono dispositivi medici e richiedono l'installazione nel rispetto dell' specifiche del produttore.



Facilitare e proteggere l'accesso ai DAE

La gamma AIVIA fornisce soluzioni adatte ad ogni esigenza. Da un semplice armadio di protezione DAE a un armadio di sorveglianza completo che può essere posizionato all'esterno con riscaldamento, monitoraggio stato DAE, chiamate di emergenza e anche funzionalità di controllo.

L'importanza della ventilazione controllata

Gli armadi AIVIA sono dotati di un sistema di ventilazione attivato da un sensore di temperatura. La ventola ha lo scopo di estrarre calore e umidità dall'armadio prevenendo la condensa e eventuali danni al DAE.



+15 anni di esperienza

500.000 teche AIVIA installate in tutto il mondo.



Resistenti

Le teche AIVIA sono progettate con plastiche in grado di resistere a forti impatti



Facili da aprire

AIVIA ha progettato le sue teche per essere facilmente apribili in una situazione di emergenza.



Qualità

Le teche AIVIA sono progettate per resistere ad ogni evento atmosferico e per prevenire la condensa.



Temperatura

Il sistema di controllo della temperatura progettato da AIVIA consente ad un DAE di operare secondo le specifiche del produttore




Made in Europe

Sviluppato e prodotto in Francia, i prodotti AIVIA sono conformi a tutte le

normative applicabili (UE e USA) e sono soggetti a rigorosi controlli qualità.



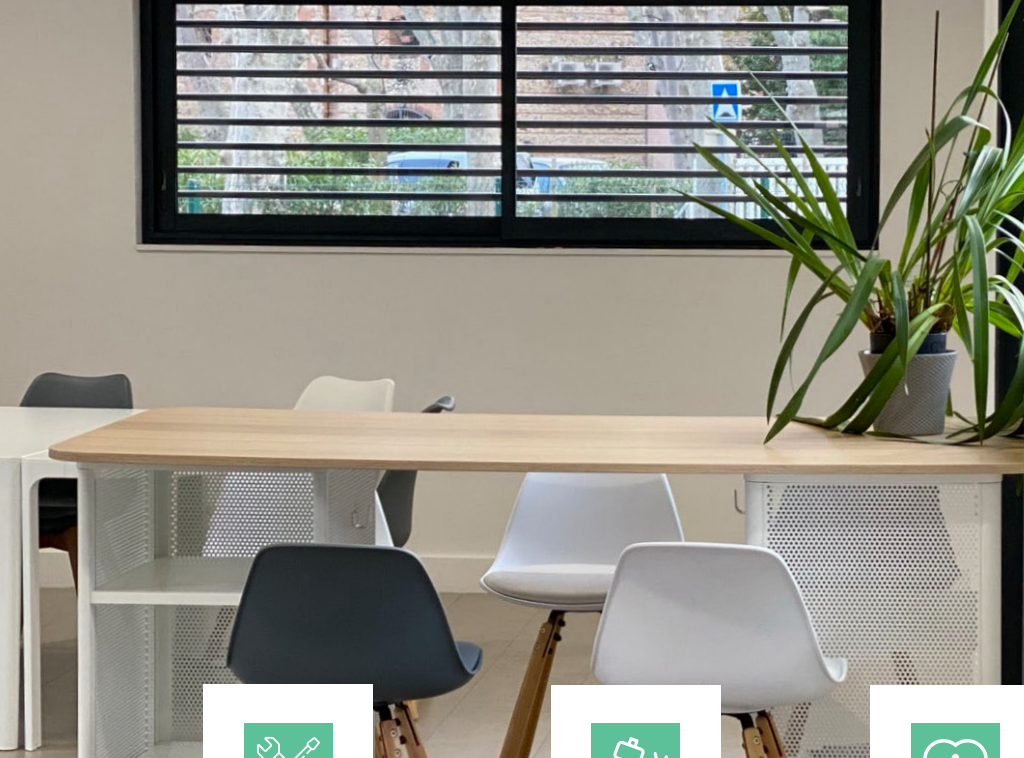

Per interni

Nuovo sistema di
apertura



Resistente

Supporto in ABS con copertura
in policarbonato resistente ai
raggi UV



Nuovo design

adatto per tutti i
DAE in commercio



Dimensione

L: 34 cm
H: 41,5 cm
P: 20 cm
Peso : 2kg

Soluzioni per esterno

Il sistema di riscaldamento della gamma da esterno mantiene una temperatura positiva nell'armadio per temperature esterne fino a -20°C .

La gamma outdoor è dotata di una ventola che consente il ricircolo dell'aria eliminando così la condensa e l'umidità nella teca.



Sicurezza

Allarme acustico da 70 a 105 decibel che si attiva all'apertura. Allarme visivo per indicare un'anomalia.



Robustezza

Indice di umidità 95% senza condensa
Materiali: ABS V0, Policarbonato
Alimentazione di rete: 24V DC SELV (Safety Extra-Low Voltage)



Riscaldamento a induzione

Il sistema di riscaldamento mantiene una temperatura positiva nell'armadio per resistere a temperature esterne fino a -20°C .



Ventilazione controllata

Il sistema si attiva automaticamente proteggendo la teca da umidità e condensa.



Apertura sicura *AIVIA 210, 230 , 310 et 330*

Apertura di sicurezza tramite codice o badge.



Combinatore telefonico

AIVIA 220, 230, 320 et 330

Modulo vivavoce per chiamate automatiche ai servizi di emergenza oa qualsiasi altro numero. Comunicazioni GSM e 4G LTE-M



Connessione IoT

AIVIA 100W et 200W

Monitoraggio remoto con informazioni sullo stato del DAE, la sua presenza e gli eventi configurati. Tecnologia SIGFOX.



Aivia



MEDIEL

FORNITURE PER MEDICI - ESTETISTE - FISIOTERAPISTI - NUTRIZIONISTI
DETTAGLIO | INGROSSO | E-COMMERCE