

Pesapersona impedenziometro Body Composition Analyzer



- Esame semplice e veloce, ideale per attività di monitoraggio
- Facile interpretazione dei dati
- Elettrodi tattili, l'uso della WBA non richiede l'impiego di elettrodi usa e getta
- Doppia funzionalità: pesapersona professionale e analizzatore di massa corporea BIA a 4 elettrodi
- Misurazione rapida: permette di effettuare un check up completo in 20 secondi
- Igienizzazione facilitata grazie alle superfici piatte e agli elettrodi inox

WU150 - WBA pag. 9

Peso, tara, peso mamma/bambino, blocco del peso, BMI (indice massa corporea), azzeramento automatico, autoOff programmabile

Struttura

Grande base in alluminio verniciata con 4 elettrodi integrati in acciaio inox. Visore in ABS a tripla lettura fissato su colonna in alluminio verniciato. 2 ruote integrate per il trasporto.

Dimensioni

Totale W450 x D550 x H880 mm
Base W450 x D340 x H85 mm
Colonna W100 x D50 x H750 mm

Alimentazione

Alimentatore esterno, vano batterie AAA e batterie ricaricabili con durata di 40h

Packaging

1 pz dimensioni W500 x D870 x H250 mm
Peso: netto 11 kg - lordo 15 kg

Uso con stampante

WBA 300 può essere utilizzata anche solo con una semplice stampante termica esterna, senza l'ausilio di software

Basta premere un tasto per ottenere la stampa completa dei risultati. Questi sono di facile comprensione come si può vedere dall'esempio della stampata a lato

WUNDER - WBA	
S/N	C22017054
Data/Ora	01/01/2022 12:00
Struttura Fisica	STANDARD
Sesso	FEMMINA
Età	38
Altezza	187.1 cm
Peso Indumenti	0.0 kg
Peso	85.9 kg
IMC/BMI	24.5
Massa Grassa %	35.9 %
Massa Grassa	30.9 kg
Liv. Grasso Viscerale	10
Massa Magra	55.0 kg
Massa Muscolare	52.1 kg
Massa Proteica	11.2 kg
Muscolo Scheletrico	26.8 kg
Massa Ossea	2.9 kg
BMR	1758 kcal
Acqua Totale	40.2 l
Acqua Intracellulare	24.6 l
Acqua Extracellulare	15.6 l
Punteggio Fisico	77.4
Età Metabolica	41.3
Impedenza	488.7ohm



Stampante termica WS



Ruote per un semplice trasporto e piedini regolabili



Versione con statimetro e stampante termica aggiunti (pag. 61/62)



Misurazione piedi scalzi a contatto con elettrodi BIA

Modello	Codice	Portata	Divisione	Piano pesata
WBA	00052D	300kg	100g/0,1%	W450 x D340mm

Accessori inclusi: alimentatore, vano batterie ricaricabili, RS232, livella, piedini regolabili, garanzia 2 anni

Optional	Codice
WS stampante termica (pag. 94)	01131T
WH200 statimetro 60-210cm (pag. 62)	00069AB
WH200D statimetro 120-202cm (pag. 61)	00051D

Servizi Optional	Codice
Omologazione metrica	AOMOL2
Certificato prove elettriche	APREL
Certificato di taratura con pesi Accredia	ACOSITMD
Certificato di taratura LAT Accredia	ACOLAT2
Estensione garanzia 5 anni	AGAES



WU150 - WBA



Body composition Analyzer

Lo strumento è dotato di un terminale elettronico a doppio LCD con tripla lettura per visualizzare contemporaneamente peso, BMI, % massa corporea e di stampare altre informazioni: kg massa grassa, kg massa magra, liquidi intra/extra cellulari e metabolismo basale, valori impedenza.

Visore ØW215 x D180mm, in ABS a doppio LCD a tripla lettura

1° Display LCD Peso a 5 cifre - 20mm

2° Display LCD multiriga BMI/% - Età/FAT a 3 cifre 12mm

Funzioni

- | | |
|---|---|
| <p> ON/OFF
Tasto di accensione e spegnimento.
Tenendo premuto per 3 secondi si spegne la bilancia.</p> <p> Zero
Azzeramento dell'indicazione del peso (entro il $\pm 2\%$ della portata).</p> <p> Esportazione
Esporta i risultati a PC o stampante termica.</p> <p> Donna
Conformazione corporea Donna.</p> <p> Uomo
Conformazione corporea Uomo.</p> | <p> Athletic
Modalità speciale solo per atleti professionisti.</p> <p> Time
Impostazione data e ora.</p> <p> Pretara
Permette di memorizzare un valore di tara impostando manualmente il dato da sottrarre (es. vestiti, carrozzina).</p> <p> C Cancella
Permette di cancellare cifre errate durante l'immissione dei dati personali.</p> <p> Enter
Per confermare le funzioni. Tasto invio.</p> <p> [0] ... [9]
Tastiera Numerica per inserimento dati personali.</p> |
|---|---|

Statimetro adulti elettronico

- Misurazioni facilitate grazie alla lettura digitale
- Cambia facilmente unità di misura
- Pratico ed intuitivo grazie all'asta telescopica
- Applicabile alle balance Wunder e a muro

Installabile su balance Wunder

Compatibile con i seguenti modelli:

RH, RA colonna, RB colonna, RW02 CORRIMANO, RW2.0 BASIC, R2020 cavo, WBA


Lettura digitale

Il display digitale rende le misurazioni semplici e immediate



Applicabile a muro

Lo statimetro si può fissare facilmente a una parete tramite l'utilizzo dell'apposito supporto

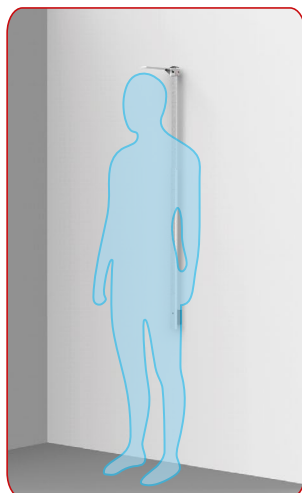

Struttura

Alluminio anodizzato serigrafato con paletta per misurare altezza in ABS

Dimensioni

W35 x D55 x H940 mm
Paletta in ABS misura 25cm

Alimentazione

2 batterie AA (incluse)

Packaging

1 pz dimensioni W60 x D120 x H1040 mm
Peso: netto 1 kg - lordo 1,6 kg



CND: V030299 - Repertorio: 676627

Modello	WH200D
Codice	00051D
Portata	Da 120 a 202cm
Unità di misura	cm/pollici
Divisione	1 mm
Garanzia	2 anni

Statimetro adulti telescopico

- Misura fino a 225cm, doppia unità di misura
- Struttura in alluminio anodizzato
- Pratico ed intuitivo grazie all'asta telescopica
- Applicabile alle balance Wunder e a muro

Installabile su balance Wunder

Compatibile con i seguenti modelli:

RH, RA colonna, RB colonna, RW02 CORRIMANO, RW2.0 BASIC, R2020 cavo, WBA


Semplice lettura

Grazie all'asta serigrafata e all'indicatore in rosso la lettura delle misurazioni è intuitiva e semplice



Applicabile a muro

Lo statimetro si può fissare facilmente a una parete tramite l'utilizzo dell'apposito supporto

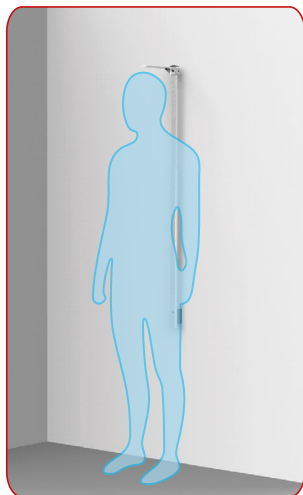

Struttura

Alluminio anodizzato serigrafato con paletta pieghevole in ABS per misurare altezza

Dimensioni

W35 x D55 x H940 mm
Paletta in ABS misura 25cm

Packaging

1 pz dimensioni W40 x D70 x H1040 mm
Peso: netto 0,7 kg - lordo 1 kg



CND: V030299 - Repertorio: 676627

Modello	WH200	WH200
Codice	00069AB	00069AD
Portata	Da 60 a 210cm	Da 65 a 225cm
Unità di misura	cm/pollici	cm/pollici
Divisione	1 mm	1 mm
Garanzia	2 anni	2 anni